

3 korzyści

1 Doskonała kompatybilność materiałowa
Możliwość dezynfekcji pleksiglasu.

2 Wydajny koncentrat
oszczędność do 500% oraz proste zastosowanie.

3 Prosta aplikacja
nakrętka z podziałką objętości umożliwia szybkie i łatwe dozowanie.

PROSEPT® Floor

Łagodny i wydajny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia dużych powierzchni zmywalnych wodą.

PROSEPT® Floor to łagodny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji metodą przecierania i szorowania powierzchni zmywalnych wodą. Preparat dezynfekujący zawiera unikalne połączenie środków aktywnych na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, która gwarantuje silne właściwości czyszczące i szerokie spektrum działania. Udokumentowana badaniami zgodność materiałowa w zakresie podłóg wykonanych z kamienia naturalnego, płytek podłogowych, PCV, ścian, urządzeń sanitarnych, płytek glazurowanych i stołów laboratoryjnych. PROSEPT® Floor nie pozostawia lepkiej powłoki ani śladów po wyschnięciu. Produkt nie zawiera aldehydów i fenoli. Specjalnie zaprojektowana nakrętka z podziałką objętości 10 ml i 20 ml zapewnia łatwą obsługę i dużą dokładność dozowania, jak również na przyjazną dla środowiska i użytkownika oraz oszczędną aplikację. PROSEPT® Floor ulega biodegradacji.

► Dlaczego

PROSEPT® Floor jest tak skuteczny?

Zawartość w 100 g: 10 g czwartorzędowych związków amoniowych, substancje zapachowe, barwniki.

Właściwości fizyczne: Przezroczysta, zielona ciecz o charakterystycznym cytrynowym zapachu.

Gęstość (20°C): 1,0 g/ml (g/cm³)

Wartość pH: 1% roztwór roboczy: 7,0

► Łatwe zastosowanie

zgodnie z prostymi wytycznymi:

1. Ze względów bezpieczeństwa nosić rękawice ochronne jednorazowego użytku i okulary ochronne.
2. Przygotować roztwór roboczy zgodnie z instrukcją na etykiecie. Użyć podziałki objętości wewnątrz nakrętki, aby zapewnić właściwe dozowanie.
3. Powierzchnie dezynfekować i czyścić poprzez przecieranie i zmywanie.
4. Sprawdzić, czy wszystkie obszary powierzchni są dokładnie zwilżone.
5. Przestrzegać czasu działania.
6. Przed pierwszym zastosowaniem wykonać próbę materiałową, nakładając produkt na niewielki obszar dezynfekowanej powierzchni.

► Ważne

ze względów bezpieczeństwa

Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

► Powierzchnia wolna od zarazków w kilka minut

Bakteriobójczy /	0.75 % w 240 min
Grzybobójczy	
	1 % w 60 min
	2 % w 15 min
WZW typu B ¹⁾ / HIV	5 % w 1 min
Wirus grypy A	0.75 % w 15 min

1) Test na obecność przeciwciał HBsAg

► Doskonałe referencje

Eksperti polecają


Prof. Dr. G. Frösner, München, D, 1997; Prof. Dr. E. Marth, Graz, A, 1997; Prof. Dr. R. Schubert, Frankfurt, D, 1997, 2003, 2007; Dr. J. Steinmann, Bremen, D, 2005; Prof. Dr. H.-P. Werner, Schwerin, D, 2000, 2001

Zgodność z metodami standardowymi DGHM oraz normami AFNOR NF T 72150 / NF T 72170 (Spectrum 4) i AFNOR NF T 72200. Numer dopuszczenia do obrotu produktu biobójczego: CHZB0278



1250



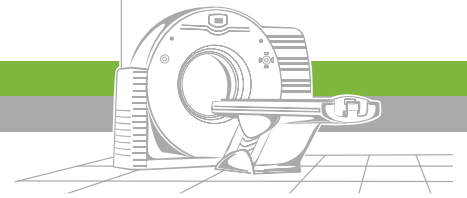

PROSEPT® Floor

Zastosowanie

Zgodnie z Dyrektywą w sprawie produktów biobójczych: Łagodny i wydajny, płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia obszarów obejmujących podłogi, korytarze oddziałowe lub urządzenia sanitarne. Zgodnie z Dyrektywą w sprawie wyrobów medycznych (93/42/WE): Łagodny i wydajny płynny koncentrat przeznaczony do dezynfekcji i czyszczenia dużych powierzchni wyrobów medycznych.

Dezynfekcja powierzchni

Kiedy stosować

- ▶ Podłogę w gabinecie zabiegowym dezynfekować po każdym dniu pracy.
- ▶ Widoczne zanieczyszczenia, np. krwią, ropą lub innymi zakaźnymi wydzielinami, należy niezwłocznie usunąć ściereczką jednorazowego użytku nasączoną środkiem dezynfekującym.

Ważne wytyczne

- ▶ Nie mieszać preparatu dezynfekcyjnego z innymi środkami czyszczącymi lub substancjami chemicznymi.
- ▶ Nakładać obfitą ilość preparatu. Do właściwego pokrycia powierzchni wymagane jest 20 ml - 40 ml roztworu roboczego na metr kwadratowy.
- ▶ Codziennie przygotowywać świeży roztwór. Po przygotowaniu nie pozostawiać roztworu w zbiorniku OROCLEAN® Floor Wiper.

Wskazówka

- ▶ Ściereczki jednorazowego użytku są wygodniejsze w użytkowaniu, ponieważ nie wymagają ponownego przygotowania do użycia.

Materiały i wyposażenie

- ▶ Rękawice jednorazowego użytku
- ▶ Okulary ochronne
- ▶ OROCLEAN® Floor Wiper lub 2 wiadra i mop
- ▶ Ściereczki jednorazowego lub wielokrotnego użytku



1. Odmierzyć PROSEPT® Floor przy użyciu podziałki objętości zgodnie z zaleceniami dotyczącymi dozowania, podanymi na etykiecie produktu.



2. Wlać koncentrat do zbiornika lub wiadra. Napełnić wodą wodociągową do wymaganej objętości.



3. Na głowicy OROCLEAN® Floor Wiper zamocować ściereczkę jednorazowego lub wielokrotnego użytku.



4. Ponownie włożyć zbiornik z przygotowanym roztworem w OROCLEAN® Floor Wiper.



5. Użyć mechanizmu rozpylającego, a następnie rozprowadzić PROSEPT® Floor poprzez wycieranie.



6. Na jeden metr kwadratowy wymagane jest w przybliżeniu 20-40 ml roztworu roboczego.



7. Odczekać wymagany czas działania. Powierzchnia musi być pokryta preparatem przez cały czas działania. W miarę możliwości nie wchodzić na zdezynfekowany obszar dopóki nie wyschnie. Po użyciu opróżnić zbiornik OROCLEAN® Floor Wiper i pozostawić do wyschnięcia.



8. Przed ponownym użyciem wyprać ściereczkę wielokrotnego użytku w temp. 95 °C.